



COMPUTER SILENIO[®]

PC ALL-IN-ONE DA 22" E 24" PER AMBIENTI IN PROSSIMITÀ DEL PAZIENTE
IGIENICO, SICURO, POTENTE

SILENIO C:



IL VERSATILE

Lo sviluppo del PC SILENIO All-In-One ha tenuto in considerazione la quotidianità ospedaliera e ambulatoriale: sono stati così creati computer igienici e potenti, ricchi di funzioni e dall'utilizzo versatile.

Silenzioso, leggero, potente

Il design snello e moderno di SILENIO può forse celare la tecnologia all'interno, ma non la potenza del PC: per questo sfrutta i potenti processori Intel i5® o i7® di sesta generazione, il disco rigido SSD e una memoria di lavoro di grandi dimensioni. Il design intelligente di SILENIO si esprime anche grazie al funzionamento completamente senza ventola e ad un lato anteriore e posteriore liscio e chiuso.



Universale e versatile

SILENIO C è pronto per ogni evenienza, grazie alla sua ricchissima dotazione: sono disponibili WLAN, webcam, altoparlante e luce da lettura LED nonché un lettore RFID. Il PC medico può essere posizionato sul braccio luminoso o sul carrello. Con il piedistallo opzionale per monitor può essere posizionato su qualsiasi scrivania.



Il supporto raffigurato è disponibile come accessorio opzionale.

Igienicamente sicuro

Negli ambulatori e negli studi medici, igiene e pulizia sono un presupposto fondamentale: per questo SILENIO dispone di un lato anteriore con protezione IP65, il quale può essere pulito con un sistema di disinfezione a spray o a strofinamento. Non sono presenti elementi di controllo sporgenti dall'apparecchio. Il controllo avviene esclusivamente tramite COMMAND BAR, una barra di comando che funziona anche con guanti chirurgici. Anche il lato posteriore non ha barre di gocciolamento o cavità nelle quali possano depositarsi residui di sporco. La copertura igienica protegge gli allacciamenti dei cavi e garantisce ancora più sicurezza. La struttura igienica rende semplice la pulizia di SILENIO ed evita così la diffusione di germi.



PCAP multi touch al posto di tastiera e mouse


Per motivi igienici, spesso tastiere e mouse non sono la scelta ideale in ambienti delicati. Per questo SILENIO è disponibile anche con uno schermo opzionale PCAP multi touch. Lo schermo è in grado di riconoscere gesti fino a 10 dita e può essere utilizzato senza problemi anche con guanti chirurgici.

RFID in futuro

Le possibilità date alla medicina dalla tecnologia RFID sono moltissime: tracciamento degli strumenti, registrazione di accesso, identificazione pazienti o altri aspetti di sicurezza diventano realtà con RFID. Anche se non disponete ancora della tecnologia RFID, SILENIO C permette di accedere a questa tecnologia in qualsiasi momento, senza dover modificare o rinnovare tutto l'hardware del PC.


COMMAND BAR: utilizzo semplice ed igienico

La COMMAND BAR è la centrale di distribuzione di SILENIO C: qui monitor e PC vengono attivati separatamente l'uno dall'altro, è possibile regolare volume e luminosità e attivare la luce da lettura integrata. Per pulire la superficie del PC, lo schermo touch [opzionale] può essere temporaneamente disattivato con la COMMAND BAR. Dal momento che tutti gli elementi di controllo si trovano dietro lo schermo anteriore in vetro, la pulizia è particolarmente comoda.

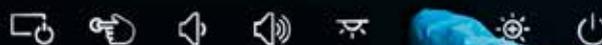The logo for 'rein medical' is displayed in white on a dark blue background. It features a stylized 'r' icon followed by the text 'rein medical'.

SILENIO C è sinonimo di maggiore sicurezza perché...

- > è un prodotto medicale di classe 1 e può essere utilizzato in zone in prossimità dei pazienti
- > è conforme a tutti i requisiti della norma DIN EN 60601-1-2
- > dispone di interfacce protette da 5 kV
- > è completamente senza ventola, per evitare in maniera efficace lo scambio e la diffusione di polvere e germi
- > può essere pulito in modo semplice ed igienicamente sicuro

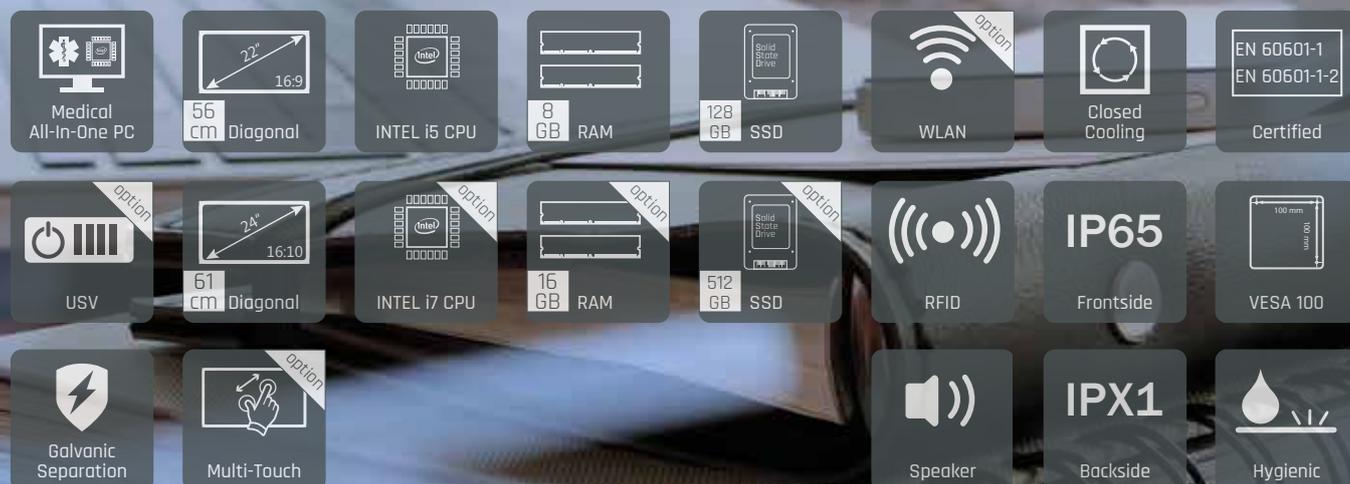



Ingressi isolati

Durante lo sviluppo di SILENIO C la sicurezza è sempre stata in primo piano. Per questo in ogni apparecchio le interfacce 2xUSB 2.0, 2xRS-232 e 2xLAN sono separate galvanicamente e dotate di protezione da 5 kV. Ciò protegge operatori, pazienti e apparecchio da correnti di guasto e sovratensioni e dai danni da esse derivanti.

RIS | KIS | PACS

SILENIO C è la scelta perfetta per ogni postazione di lavoro, sia che si tratti di un sistema informatico ospedaliero o radiologico (KIS/RIS) o di un sistema medico di comunicazione ed archiviazione di immagini (PACS). Il PC All-In-One è una garanzia, grazie ad un'ottima capacità di calcolo, uno schermo eccellente e numerosi elementi di equipaggiamento. Le sue numerose possibilità di collegamento garantiscono uno scambio di informazioni fluido tra i diversi reparti ospedalieri.

IN CONCLUSIONE

Il computer SILENIO soddisfa tutti i requisiti richiesti ad un PC medico moderno: semplice pulizia e sicurezza dal punto di vista dell'igiene, potenza e ricchezza di strumentazione. Svariate possibilità di utilizzo, perché può essere utilizzato come monitor luminoso, PC per postazione da lavoro o, grazie all'alimentazione di corrente senza interruzioni, come soluzione su carrello.

BROCHURE DI REIN MEDICAL


Rein Medical mette a disposizione una vastità di informazioni, che si tratti di singoli prodotti o progetti di integrazione complessi: nelle nostre brochure troverete una sintesi delle caratteristiche, dei vantaggi ed esempi applicativi più importanti.



N. ord. DS-EN-SIC-122



N. ord. DS-EN-SIC-124

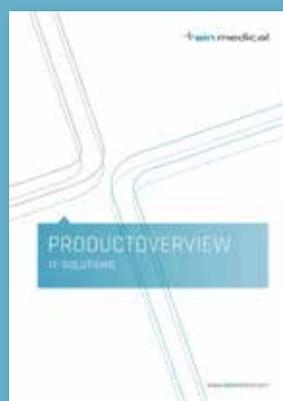

N. ord. BR-EN-PRK



N. ord. BR-EN-C4C

Su richiesta le invieremo gratuitamente le nostre brochure. Invii semplicemente una e-mail con i dati della/e brochure desiderata/e a: info@reinmedical.com. In aggiunta, potrà scaricare tutte le nostre brochure in formato PDF sul sito: www.reinmedical.com

www.reinmedical.de

Sede principale Germania

Rein Medical GmbH

Schwalmstraße 301 [Monforts Quartier 23]
41238 Mönchengladbach
Tel. +49 2161 6984-0, Fax +49 2161 6984-259
E-mail: info@reinmedical.com

Svizzera

Rein Medical AG

Büfelderstraße 1, CH-8370 Sirmach TG
Tel. +41 71 929 55 99, Telefax +41 71 929 55 90
E-mail: info.ch@reinmedical.com

Spagna

Rein Medical Systems S.A.

C/ Téllez 30
1ª Planta, Oficina 2 Puerta 3, 28007 Madrid
Tel. +34 91 530 88 24, Fax +34 91 574 32 93
E-mail: info.es@reinmedical.com